

## Toepassingsgebied

Deze inzendrichtlijn is van toepassing bij het inzenden van baarmoederhals/vagina uitstrijken (DLC: Dunne Laag Cytologie) voor cytologisch onderzoek vanuit de ziekenhuizen en huisartsenpraktijken naar Pathologie Friesland.

## Doel

Dit document is een richtlijn voor aanvragers over hoe DLC voor cytologisch onderzoek op de juiste manier te behandelen en op te sturen.

Door het materiaal op de juiste manier in te zenden, komt het in optimale conditie binnen. Wanneer dit niet gebeurt, kan dit consequenties hebben voor de kwaliteit van de diagnostiek en daarmee voor de behandeling van de patiënt.

Als het materiaal op de juiste wijze is verpakt, afgesloten en voorzien van een volledig ingevuld aanvraagformulier met de patiënt- en klinische gegevens, kan het onderzoek snel en accuraat worden ingevoerd in ons laboratorium-informatiesysteem.

Als er gegevens niet compleet zijn, zijn we genoodzaakt contact op te nemen met de aanvrager. Dit kan het onderzoek vertragen.

## Instructie

### DLC voorbereiden

#### Cervix-Brush Combi



Afname techniek	1½ á 2 x met een zachte druk, met de klok mee, ronddraaien over de portio.
	Brush na materiaal afname direct <b>flink</b> (10X) uitstampen (als een oude verfkwast) in Thin prep. potje. → Eventueel met spatel rest materiaal van de brush schrapen.
	<b>GEEN</b> brush in potje achterlaten.
	Potje dichtdraaien, tot zwarte markeerstreepjes boven elkaar zitten. → Cervex Brush Combi <b>NIET</b> gebruiken bij zwangerschap.
Glijmiddel	<u>Geen</u> glijmiddel op oliebasis gebruiken, dit heeft invloed op het ThinPrep PAP test proces.

### Bewerken en inzenden DLC

- Schrijf met potlood op het etiket van het ThinPrep potje de naam en geboortedatum van de patiënt op onderstaande wijze.



Geen stickers over de tussenruimte van het etiket plakken. Deze stickers moeten in het laboratorium alsnog verwijderd worden, omdat de potjes anders niet verwerkt kunnen worden.

Graag de sticker met persoonsgegevens **op** het etiket plakken, waardoor de tussenruimte niet bedekt wordt. Het maakt niet uit dat hierdoor andere gegevens op het etiket bedekt worden.

Op het etiket staan twee verticale blauwe lijnen. Hier kunt u met potlood de naam en geboortedatum van de patiënt noteren. Graag niet met pen of stift in verband met het gevaar voor het uitlopen van de inkt.

- Plaats potje in het gripzakje met een vochtabsorberend doekje.
- Sluit de sluitstrip goed.
- Plaats het volledig ingevulde aanvraagformulier in de zijvakje van het gripzakje.
- Voor de ziekenhuizen: Geef het onderzoeksmateriaal met aanvraagformulier af op de afgifteplaats van het ziekenhuis (in transportbak Pathologie Friesland)
- Voor de huisartsenpraktijken: Geef het materiaal mee met de chauffeur van Pathologie Friesland.
- Bij tussentijdse opslag: bewaar het ThinPrep potje in de koelkast.

### Bijbehorende documenten

Aanvraagformulier BVO (heeft patiënt ontvangen via screeningsorganisatie).

[Aanvraagformulier Medische indicatie cervix – cytologie.](#)

[Aanvraagformulier Speciële cytologie](#) (alleen te gebruiken bij vagina DLC van de ziekenhuizen).

[Aanvraagformulier Pathologie-onderzoek huisarts](#) (alleen te gebruiken bij vagina DLC van de huisartsen)..

### Opmerkingen

Aanvraagformulieren, gripzakjes en DLC potjes zijn te bestellen via de website van Pathologie Friesland [www.pathologiefriesland.nl](http://www.pathologiefriesland.nl) .


Voor vragen of spoedaanvragen kunt u contact opnemen via de e-mail [pathologie@pathologiefriesland.nl](mailto:pathologie@pathologiefriesland.nl) of met de frontoffice, tel. 058 293 93 93.

### Beknopte handleiding Protocol voor de Rovers Cervix Brush Combi

# ThinPrep® Pap Test


## Beknopte handleiding Protocol voor de Rovers® Cervix-Brush Combi

LABORATORY SOLUTIONS



#### Protocol voor de Rovers Cervix-Brush Combi bij de ThinPrep Pap Test

- Zet alles klaar alvorens aan de procedure te beginnen.
- Controleer de uiterste gebruiksdatum op het potje.
- Controleer of de complete plastic verzegeling van het dekseltje van het potje verwijderd is en weggegooid. Zorg er voor dat het potje is verzegeld als u het pakt, verwijder daarna het plastic zegel. Indien het zegel verbroken is en u heeft dat niet gedaan, pak dan een nieuw potje.
- Vul de patiëntgegevens op zowel het aanvraagformulier als het potje volledig in. Als er gegevens missen op het potje bestaat de kans dat het monster wordt teruggestuurd.
- Verwijder voor het nemen van het monster het dekseltje van het potje.
- Gebruik geen glijmiddel omdat dat invloed kan hebben op het ThinPrep Pap Test proces.

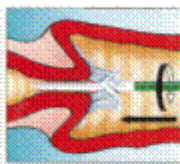

#### Neem

Volgende materiaal uit de baarmoederhals met een Rovers Cervix-Brush Combi (groen bezemachtig instrumentje met een geïntegreerd endocervicaal afnameborsteltje). Desgewenst kan het speculum worden verwarmd en gelubriceerd met handwarm water. Indien nodig kan een kleine hoeveelheid wateroplosbaar glijmiddel worden aangebracht op het posterieure speculumblad.<sup>1</sup> Plaats het endocervicale deel van het afnameborsteltje diep genoeg in het baarmoederhalskanaal zodat de andere borstelhaartjes volledig contact maken met de baarmoedermond. Druk zachtjes en draai de borstel 2 keer rond met de klok mee.<sup>2</sup>



#### Spoel

De Rovers Cervix-Brush Combi meten uit in het potje met PreservCyt® oplossing door hem 10 keer op de bodem van het potje te drukken waardoor de borstelhaartjes uit elkaar komen te staan. Draai het borsteltje ten slotte krachtig rond zodat al het materiaal vrijkomt. Controleer de Rovers Cervix-Brush Combi met het oog om er zeker van te zijn dat er geen resten zijn achtergebleven. Gooi het afnameborsteltje weg. Laat de kop van de Rovers Cervix-Brush Combi niet achter in het potje.



#### Draai

Het dopje er zodanig op dat de markering op het dopje over de markering op het potje valt.



#### Noteer

De naam en het ID-nummer van de patiënt op het potje.

#### Noteer

Informatie over en medische geschiedenis van de patiënt op het aanvraagformulier voor cytologie.



#### Doe

Het potje en het aanvraagformulier in een monsterenveloppe voor verzending naar het laboratorium.